



HaemoCer™ PLUS - Endoscopic Set

Hämostatisches Pulver auf Pflanzenbasis

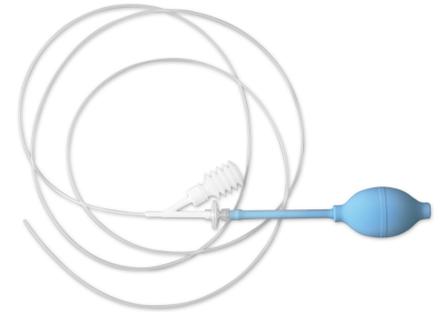

HaemoCer™ PLUS ist ein innovatives pulverförmiges Blutstillungsmittel auf pflanzlicher Basis zur unterstützenden Hämostase bei chirurgischen Eingriffen. Das komplett resorbierbare Material beschleunigt durch seine enorme Wasseraufnahme die natürliche Gerinnungskaskade, wodurch eine sofortige Blutstillung erfolgt.

HaemoCer™ Endoscopic Applicator dient zur Anwendung von HaemoCer™ PLUS bei oberen und unteren gastrointestinalen Blutungen. Der Applikationsschlauch wird durch das Endoskop eingeführt und zur Blutung hin ausgerichtet. Der von dem Pumpball erzeugte Druckluftstrom transportiert das Pulver direkt zur Blutung.

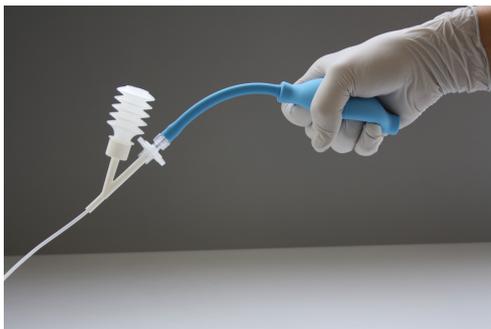

- Pumpball als pneumatische Quelle
- Flexibles, manuell bedienbares Einweggerät
- **100% frei** von tierischen und humanen Bestandteilen
- **Unmittelbar einsatzbereit** ohne langwierige Vorbereitung wie z.B. Auftauen oder Anmischen
- Kommt **ohne Hilfsmittel** wie z.B. Kompressor oder Hochdruckgasquelle aus
- HaemoCer™ PLUS wird durch Amylase **innerhalb von wenigen Tagen vom Körper zu 100% abgebaut**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt pro Packung
HFP203	HaemoCer Plus, Haemostatic Powder, 3g	1 Stück
HFS323	HaemoCer Plus Endoscopic Set with 3g Powder	1 Stück